

snogg®

ANIMAL CARE



Animal WOUND CARE

PARA TRATAMIENTO Y SUJECIÓN



— SNÖGG ANIMAL CARE — Cuidando heridas en animales desde 1980

Snögg Animal Care cuenta con más de 40 años de experiencia en el cuidado de heridas en animales. Snögg Animal Care ofrece una gama de vendas que responden a distintas necesidades y se adaptan fácilmente a todas las partes del cuerpo del animal.

Los productos están destinados para uso en animales y desarrollados en colaboración con veterinarios y expertos en heridas en animales.



Snögg Animal Care

Una gama de vendas de diferentes tamaños y grosores adecuados para tratar y proteger heridas en todo tipo de animales, ya sean grandes o pequeños.





- ✓ Fácil de poner y quitar – sin estrés innecesario para el animal
- ✓ Puede utilizarse para vendar zonas difíciles en el cuerpo del animal
- ✓ Multiuso – para todo tipo de animales y fases del proceso de cicatrización de heridas
- ✓ Puede combinarse fácilmente con otros procedimientos de cuidado de heridas
- ✓ Para tratamiento y sujeción



Adhesive FOAM BANDAGE

Adhesive Foam Bandage es una venda elástica de espuma con gran adherencia tanto al pelaje como a la piel. La venda tiene adhesivo en una cara, lo que permite su aplicación en cualquier parte del animal, y es ideal para acolchar y fijar, o para sujetar dispositivos de monitorización, por ejemplo, los electrodos ECG. Podrás crear fácilmente un apósito para heridas combinando *Adhesive Foam Bandage* con una compresa, o con *Thick Foam Bandage*.

SIN
LÁTEX

- Suave y flexible
- Adherencia en una cara
- Se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo del animal



*Cuando se necesite una
gran adherencia al pelaje*

Adhesive Foam Bandage está disponible en 3 tamaños para adaptarse a diferentes animales y heridas:



REF 510002410
9 x 200 cm




REF 510002412
14 x 200 cm




REF 510002413
22 x 200 cm

PROTECCIÓN DE HERIDAS:

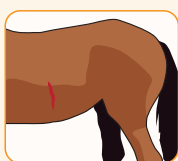

Asegúrate de que la herida está limpia y el pelaje seco.

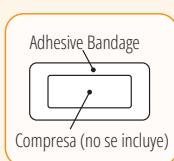

Utiliza una compresa (no se incluye) para proteger la herida.



Fija la compresa con Adhesive Foam Bandage.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

— Adhesive Foam Bandage — REMOVAL WIPES

Las toallitas **Removal Wipes** permiten eliminar los restos de adhesivo del pelaje del animal de forma más fácil y suave, lo que reduce molestias e irritación a la hora de retirar vendas adhesivas. Fórmula sin alcohol que no reseca la piel. Las toallitas son un complemento a **Adhesive Foam Bandages**.

FACILITAN LA RETIRADA DE ADHESIVE FOAM BANDAGES:

- Fácil de quitar
- Uso sencillo y eficaz
- Fórmula sin alcohol

SIN LÁTEX



REF 510002378
30 toallitas (12 x 18 cm)





*Flexibilidad y libertad
de movimiento con
Thick Foam Bandage*

Thick FOAM BANDAGE

Thick Foam Bandage es una venda autoadherente única que se pega sobre sí misma pero no a la herida, ni al pelaje, ni la piel. Es flexible, permite una gran movilidad y es fácil de moldear. Es una venda de espuma absorbente y suave, y es ideal para usar en heridas con el fin de fijar o acolchar.


SIN
LÁTEX

- Solo se adhiere sobre sí misma
- Se puede colocar directamente sobre la herida
- Absorbente, suave y flexible




REF 510002411
9 x 200 cm


VENDAJE DE PATAS:

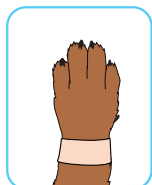


Envuelve la extremidad con un trozo de Thick Foam Bandage o Thin Foam Bandage.

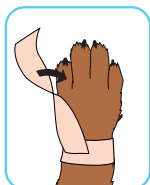

Corta una longitud adecuada para que quepa entre los dedos. Fija en la envoltura y gírala 180 grados.

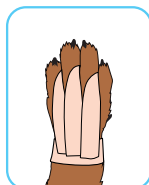


Desliza la parte estrecha entre los dedos y fija la envoltura en el otro lado. Repite para cada dedo.

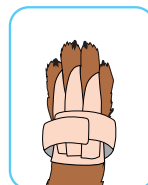


Por último, envuelve la extremidad con una segunda venda para asegurar el vendaje.



Asegúrate de que la herida esté limpia y el pelaje/la extremidad secos.

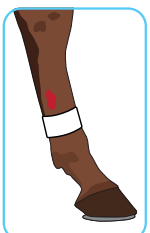

Enrolla el Adhesive Foam Bandage (no se incluye) debajo de la zona herida para fijar.

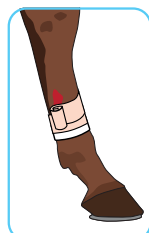

A continuación, envuelve la venda Thick Foam Bandage alrededor de la herida en forma de espiral. Solapa al primer vendaje de 2 a 3 cm.



Sustituye el vendaje realizado con Thick Foam Bandage cuando sea necesario. El primer vendaje se retira cuando finaliza la cicatrización.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

Thin FOAM BANDAGE

Thin Foam Bandage se moldea fácilmente y proporciona amplia flexibilidad. La venda de espuma autoadherente se adhiere sobre sí misma y no a la piel, ni el pelaje, ni la herida. Es suave, absorbente y puede colocarse directamente sobre la herida.


SIN
LÁTEX

- Solo se adhiere sobre sí misma
- Se puede colocar directamente sobre la herida
- Muchas zonas de uso, p. ej., ubres de vacas




REF 510002379
6 x 450 cm


VENDAJE DE PATAS:

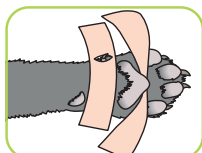


Coloca un trozo de venda entre los dedos y la almohadilla. Haz una ranura en la venda y Colócala alrededor del espolón.

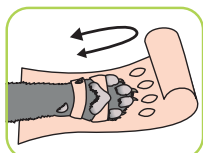

Corta una tira de venda a lo largo. Haz ranuras para que pasen los dedos.

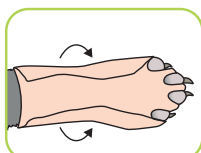

Desliza los dedos por las ranuras y dobla la venda como se muestra.


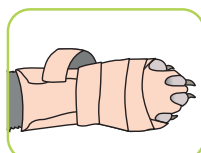


Si fuese necesario, enrolla una tira adicional de venda alrededor de la pata para asegurar el vendaje.



Escanea el código QR para obtener instrucciones detalladas.

VENDAJE DE UBRES:

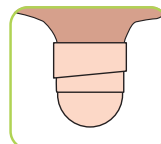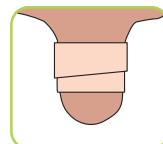

Utiliza Thin Foam Bandage en caso de heridas en ubres o para fijación de tapones pezonera.

A close-up photograph of a tabby cat lying on its side on a plush, light green surface. The cat has dark brown and black stripes over a lighter brown base, with a white patch on its chest. Its right front paw is held up, showing a large, light-colored, oval-shaped bandage. The cat's eyes are partially closed, and it has a calm expression. The background is a soft, textured green.

*Thin Foam Bandage es
elástico y autoadherente*

*Una venda exterior envolvente
ideal para la fijación de
compresas y vendajes*



Flex WRAP BANDAGE

Flex Wrap Bandage es una venda exterior flexible y elástica. No se pega a la piel, el pelaje, ni las heridas y es ideal para la fijación de compresas y vendajes realizados con Thick / Thin Foam bandage. Protege de la suciedad y la humedad y se adapta a distintas partes del cuerpo del animal. Disponible en 2 tamaños y envasado en un práctico expositor de cartón.

- Fácil y rápida de poner y quitar
- Se adhiere sobre sí misma
- Protege de la suciedad y la humedad



REF 510002414
5 x 450 cm

REF 510002393
10 x 450 cm

SNÖGG ANIMAL CARE

Facilita la retirada de Adhesive Foam Bandage con las toallitas **REMOVAL WIPES**



	ADHESIVE FOAM BANDAGE	THICK FOAM BANDAGE	THIN FOAM BANDAGE	FLEX WRAP BANDAGE
Se adhiere sobre sí misma – no al pelaje, ni la piel, ni las heridas	X	✓	✓	✓
Se adhiere al pelaje – excelente adherencia al pelaje y la piel	✓	X	X	X
Elástico cruzado	✓	✓	✓	X
Elástico longitudinal	X	✓	✓	✓
Absorbente	X	✓	✓	X
Detiene el sangrado	X	✓	✓	X
Adherente incluso en mojado	X	✓	✓	X
Adecuado para capas primarias	X	✓	✓	X
Adecuado para capas secundarias	✓	✓	✓	✓
Adecuado para capas terciarias	✓	X	X	✓
Fijación	✓	✓	✓	✓
Espesor	5 mm	5 mm	1,9 mm	
REF / Tamaño	REF 510002410 9 x 200 cm REF 510002412 14 x 200 cm REF 510002413 22 x 200 cm REF 510002378 (Removal wipes) 30 toallitas (12 x 18 cm)	REF 510002411 9 x 200 cm	REF 510002379 6 x 450 cm	REF 510002414 5 x 450 cm REF 510002393 10 x 450 cm

www.snogg.com


Orkla Cederroth SAU, Pol. Ind Can Barri
Calle D 08415 Bigues, Barcelona, España
Tel: +34 93 865 70 09, atencionalcliente@orkla.es
www.snogg.com